




Grapadoras circulares

*GAMA COMPLETA DE GRAPADORAS
CIRCULARES AVANZADAS ADAPTADAS A
TODAS LAS NECESIDADES*

Estándar
y
Extra-Larga



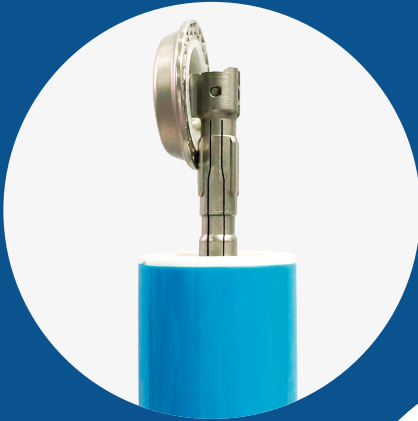

Único cabezal abatible 90°

Para una extracción fácil y segura a través de la anastomosis, minimizando el potencial daño del tejido.



Arandela de corte mejorada

Feedback claro para el cirujano.




Sistema autobloqueo

Previene el deslizamiento del tejido y elimina posibles problemas cuando el cabezal se deslice durante el disparo.

Diseño hermético

Diseño hermético para cirugía laparoscópica, previene la pérdida del pneumoperitoneo.

GRAPADORAS CIRCULARES

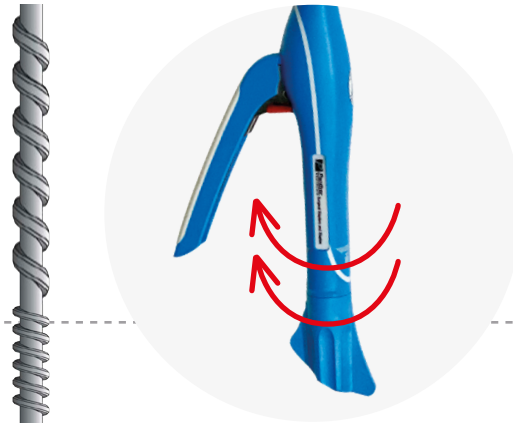

Función de doble-velocidad

Al cerrar el instrumento, en las etapas finales de cierre, el cierre obtenido por cada vuelta de la perilla de cierre es menor que al inicio. Proporciona un mejor control de la acción de cierre, el tejido se comprime de forma más segura evitando cualquier posible daño.



Doble sistema de seguridad

Previene el disparo accidental del dispositivo.

GRAPADORAS CIRCULARES



<i>Referencia</i>	<i>Descripción</i>
-------------------	--------------------

FCSLWAF21	21 mm, extra larga, seguridad dual, cabezal abatible, 4.5mm altura de grapa
FCSLWAF25	25 mm, extra larga, seguridad dual, cabezal abatible, 4.8mm altura de grapa
FCSLWAF29	29 mm, extra larga, seguridad dual, cabezal abatible, 4.8mm altura de grapa
FCSLWAF32	32 mm, extra larga, seguridad dual, cabezal abatible, 5mm altura de grapa



FCSME21	21 mm, seguridad dual, cabezal abatible, 4.5mm altura de grapa
FCSME24	24 mm, seguridad dual, cabezal abatible, 4.5mm altura de grapa
FCSME26	26 mm, seguridad dual, cabezal abatible, 4.8mm altura de grapa
FCSME29	29 mm, seguridad dual, cabezal abatible, 4.8mm altura de grapa
FCSME32	32 mm, seguridad dual, cabezal abatible, 5mm altura de grapa