



VCare® Plus y VCare® DX Plus


VCare® Plus ayuda a los cirujanos a tener un control superior de la anatomía, una manipulación uterina efectiva e identificar puntos de referencia clave para un procedimiento seguro, eficiente y repetible.



SELLO DE AIRE iFS
SISTEMA DE GESTIÓN DE INSUFLACIÓN



PUERTOS DE ACCESO HERMÉTICOS
ACCESO LIBRE DE VÁLVULA

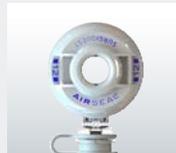

INSTRUMENTOS MICROLAP®
ENFOQUE MENOS INVASIVO



Para obtener más información sobre estos y otros productos innovadores, llame al **800-448-6506** o visite **CONMED.com**

VCare Plus & VCare[®] DX Plus

El nuevo y mejorado manipulador uterino VCare ayuda a una experiencia quirúrgica aún mejor.

- Proporciona una exposición superior y acceso a la cavidad pélvica
- Delinea los fornices vaginales para una fácil identificación del plano de colpotomía
- Mantiene el neumoperitoneo durante todo el procedimiento
- Cabezal con balón oclusivo que se puede inflar a diferentes diámetros

Cresta de Guía

Copa verde brillante con cresta guía que ayuda a definir el hito de incisión preciso para la colpotomía

Eje Curvado Natural

Se ajusta a la anatomía del paciente para inserción más fácil y mejor exposición

Marcas de Graduación

Ayuda a alcanzar la profundidad de inserción adecuada

Oclusor Proximal

La copa trasera bloquea su posición para asegurar la copa delantera y evita la pérdida de neumoperitoneo. Se ajusta a diferentes medidas de tallo endouterino

Mango Ergonómico

Control mejorado para una mejor manipulación y acceso a objetivos quirúrgicos clave

Una posición de las manos más cómoda para reducir la fatiga

NUEVO



Fácil de Usar

Dispositivo de una sola pieza, totalmente ensamblado, reduce el tiempo requerido para el ensamblaje.

Elimina el costo asociado con componentes adicionales, reparación, esterilización o partes perdidas.

Beneficios Adicionales

Permite suturar la copa para mejorar la estabilidad del útero.

El globo inflable de 10cc reduce el riesgo de perforación uterina al anclar el útero y estabilizar el eje dentro de la cavidad uterina.

Diseño Optimizado de Copa Distal


Mobilidad y articulación mejorada

La geometría de la copa y los múltiples tamaños permiten un mejor asentamiento del cuello uterino

Compatible armónico

VCare DX Plus proporciona un excelente control del útero sin distensión de fornices vaginales. Ideal para:

- Ligadura de Trompas
- Miomectomías
- Laparoscopia Diagnóstica
- Tratamiento de Endometriosis

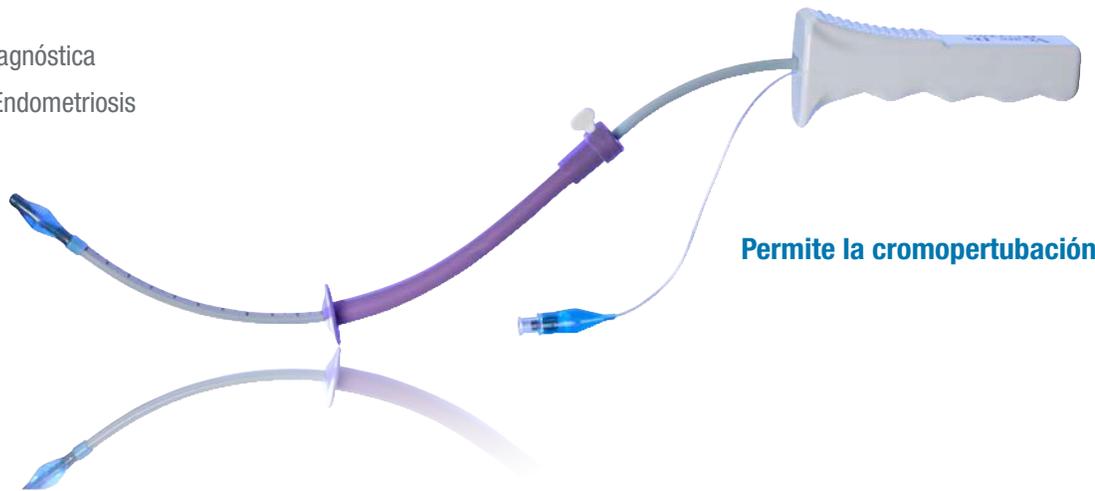

Permite la cromopertubación

Información para Ordenar

Descripción	Cant	N° de Catálogo
VCare® Plus		
VCare® Plus, Small (32mm) Cervical Cup	8/cs	60-6085-200A
VCare® Plus, Medium (34mm) Cervical Cup	8/cs	60-6085-201A
VCare® Plus, Large (37mm) Cervical Cup	8/cs	60-6085-202A
VCare® Plus, X-Large (40mm) Cervical Cup	8/cs	60-6085-203A
VCare® DX Plus		
VCare® DX Plus Manipulator	8/cs	60-6080-000A

Customer Service: 1-800-448-6506
International Sales: 1-315-797-8375
Fax: 1-800-438-3051

CONMED.com
info@mail.CONMED.com